

nuvitamed 



**Bye Bite**

ПРИБОР ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ



2110

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

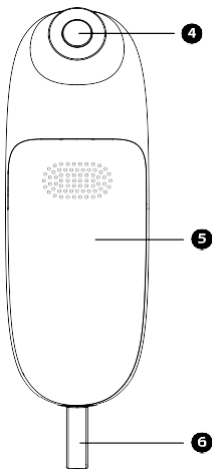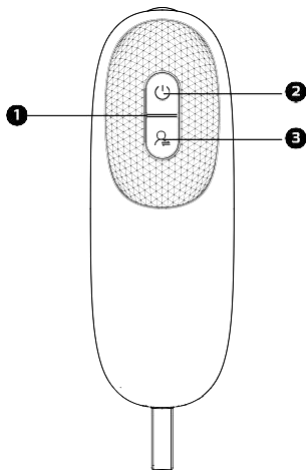

Благодарим вас за покупку аппарата от укусов насекомых Bye Bite. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием прибора и положите его в надежное место для хранения.

**Назначение:** Прибор от укусов насекомых предназначено для снятия зуда и отека, вызванных укусами или ужалениями насекомых, путем применения тепла (локальная гипертермия).

**Целевая аудитория:** подходит для людей, которые хотят снять зуд и отек, вызванные укусами или ужалениями насекомых. Возраст старше 3 лет под наблюдением взрослых, может использоваться для самостоятельного лечения всеми, кто старше 12 лет.

**Показание к применению:** рекомендуется при зуде и отеках, вызванных укусами или ужалениями насекомых.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

---

- Не используйте прибор, если вы страдаете диабетом, тк чувствительность к боли может снизиться, а диабетики могут получить ожог.
- Не используйте прибор для людей с ограниченными возможностями, детей младше 3 лет или людей с пониженной чувствительностью к теплу. К ним относятся люди с изменениями кожи из-за болезни или рубцовой ткани в области применения, после приема обезболивающих препаратов или употребления алкоголя.
- Не используйте прибор на травмированной или раздраженной коже (например, воспаленная кожа, болезненная, покрасневшая кожа, при аллергии, ожогах, обморожениях, синяках, припухлости (без признаков укуса насекомого/ожога), открытые и заживающие раны, хирургические шрамы, на

- которые может повлиять процесс заживления).
- Не используйте прибор, если у вас высокая температура.
- Не используйте прибор на чувствительных участках кожи.
- Не используйте прибор, если у вас есть какие-либо сенсорные нарушения, которые снижают ощущение боли (например, нарушения обмена веществ).
- Не используйте прибор, если вы одновременно применяете лосьоны, кремы и гели местного действия.
- Не используйте прибор, если вы страдаете от постоянного раздражения кожи, вызванного длительным воздействием тепла на один и тот же участок кожи.

## **ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

---

- Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо заболевания кожи, серьезные заболевания (в частности, склонность к тромбоэмболическим состояниям или рецидивирующим злокачественным образованиям), необъяснимые хронические боли в любой части тела.
- Немедленно обратитесь к врачу, если симптомы укуса сохраняются после нескольких применений. Прекратите использование устройства.
- Если во время или после использования средства от укусов насекомых симптомы ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу и прекратите его использование.
- При укусе клеща немедленно обратитесь к врачу. Укус может привести к передаче возбудителей таких заболеваний, как клещевой энцефалит (ТВЕ) или боррелиоз.
- При появлении первых признаков усиления зуда, покраснения кожи, отека, головокружения, тошноты, одышки, образования сыпи, снижения или повышения артериального давления немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте вблизи глаз, на веках, во рту или на слизистых оболочках. Кроме того, прибор нельзя использовать на влажной коже.

- Не позволяйте детям играть с устройством. Храните в недоступном для детей месте.
- При использовании прибора соблюдайте общие меры гигиены.
- Прибор не заменяет консультацию и лечение у врача. Проконсультируйтесь с врачом, если вы испытываете боль или страдаете от какого-либо заболевания.
- Если устройство не работает должным образом, если вы чувствуете себя плохо или испытываете боль, немедленно прекратите его использование.
- 

## **ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

---

- Не мойте устройство.
- Не используйте моющие средства или растворители для очистки и обслуживания устройства. Если жидкость попадет внутрь устройства, это может привести к повреждению электроники или других деталей устройства, а также к неисправности.
- Желательно использовать прибор только одним человеком; использование несколькими людьми не рекомендуется.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, храните его в сухом месте. Защищайте его от пыли, химикатов и сильных перепадов температуры.
- Берегите устройство от ударов, влаги, пыли, химикатов, резких перепадов температуры и близких источников тепла (печей, обогревателей).
- Перед использованием убедитесь, что устройство не имеет видимых повреждений. В случае сомнений не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр.



- При попадании жидкости из батареек на кожу или в глаза промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте.
- Опасность взрыва! Не бросайте батареи в огонь.
- Если батарея протекла, наденьте защитные перчатки и протрите батарейный отсек сухой тканью.
- Не разбирайте, не открывайте и не раздавливайте батареи.
- Соблюдайте знаки полярности "плюс" (+) и "минус" (-).
- Защищайте батареи от чрезмерного нагрева.
- Не заряжайте и не замыкайте батареи.
- Если устройство не будет использоваться в течение относительно долгого времени, извлеките батарейки из батарейного отсека.
- Используйте только идентичные или эквивалентные типы батарей.
- Всегда заменяйте все батареи одновременно.
- Не используйте перезаряжаемые батареи!

## ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

---

- Устройство подходит для использования в домашних условиях.
- Использование устройства может быть ограничено при наличии электромагнитных помех. Это может привести к таким проблемам, как сообщения об ошибках или выход устройства из строя.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

---

Изображения на странице 2.

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. LED индикатор    | 4. Нагревательная пластина (MCH) |
| 2. Кнопка включения | 5. Крышка отсека батареек        |
| 3. Кнопка активации | 6. Силиконовая ручка             |

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

---

1. Откройте крышку батарейного отсека (5).
2. Вставьте батарейки (не входят в комплект) в отсек для батареек, как показано внутри отсека. Вставляя батарейки, следите за соблюдением правильной полярности (+/-).
3. Задвиньте крышку батарейного отсека (5), пока не почувствуете и не услышите, как она защелкнулась.
4. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени (более 3 месяцев).

---

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Перед использованием убедитесь, что в месте укуса не осталось жала насекомого.

Перед использованием аккуратно удалите жало. Используйте сразу после укуса или ужаления насекомого.

Если вы слишком долго ждете, чтобы обработать место укуса или ужаления, а зуд и отек уже начались, средство от укусов насекомых может оказать лишь ограниченное действие. Тем не менее, обработайте участок средством от укусов насекомых. Как правило, зуд можно снять, а заживление ускорить.

1. Нажмите кнопку включения (2), чтобы запустить устройство. Светодиодный индикатор состояния устройства (1) загорится зеленым цветом, раздастся звуковой сигнал, сигнализирующий о готовности устройства к работе.

2. Для 3-секундного применения поместите нагревательную пластину (МСН) (4) прибора на место укуса или ужаления. Нажмите кнопку активации один раз. Светодиодный индикатор состояния прибора (1) загорится синим цветом, сигнализируя о начале аппликации. Температура обработки прибором составляет  $47\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $116,6^{\circ}\text{F} \pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ). Такое короткое время применения рекомендуется для первого использования или использования на чувствительной коже.

3. Для 6-секундного применения поместите нагревательную пластину (МСН) (4) прибора на место укуса или ужаления. Дважды быстро нажмите кнопку активации. Светодиодный индикатор состояния прибора (1) загорится желтым цветом, сигнализируя о начале аппликации. Температура обработки прибора составляет  $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F} \pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ). Это время применения рекомендуется для регулярного использования при нормальной коже.

4. По окончании процедуры раздается звуковой сигнал, нагрев нагревательной пластины (МСН) (4) автоматически останавливается, и светодиодный индикатор состояния прибора (1) снова загорается зеленым цветом. Снимите нагревательную пластину (МСН) (4) с участка кожи, как только прозвучит сигнал.





## **ВАЖНО**

В зависимости от чувствительности человека, использующего прибор, и участка кожи температура воздействия может быть неприятной и вызывать легкое покраснение и, в редких случаях, раздражение кожи. Если температура слишком высока, немедленно прекратите лечение.

5. При необходимости вы можете использовать тепловую функцию средства для лечения укусов насекомых на месте укуса снова после перерыва в 2 минуты или сразу же использовать его на другом месте укуса. Максимальное количество 5 применений в час на одном и том же участке обработки не должно быть превышено.
6. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку включения/выключения (2). Зеленый светодиодный индикатор состояния устройства (1) погаснет. Если в течение 5 минут устройство не будет работать, оно автоматически выключится.
7. Перед хранением убедитесь, что прибор выключен и нагревательная пластина

**Предупреждение о разряде батареи:** прежде чем уровень заряда батареи станет слишком низким для других приложений, светодиодный индикатор состояния устройства (1) начнет мигать 3 раза и прозвучит звуковой сигнал 3 раза. В ближайшее время замените обе батареи.

Соблюдайте следующие правила гигиены, чтобы избежать риска для здоровья:

- Устройство предназначено для многократного использования.
- Рекомендуется очищать прибор перед первым и каждым последующим использованием.
- Перед очисткой прибор необходимо выключить, дать ему остыть и каждый раз вынимать из него батарейки.
- Для очистки корпуса используйте только мягкие, сухие ткани.
- Никогда не используйте для чистки вещества, которые могут оказаться токсичными при контакте с кожей или слизистыми оболочками, а также при проглатывании или вдыхании. Не используйте абразивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.
- Не мойте прибор в посудомоечной машине!
- Избегайте механической очистки с помощью щеток или других подобных средств, так как это может привести к непоправимым повреждениям.
- При использовании прибора на нескольких участках, подвергшихся укусам и ужалениям, рекомендуется каждый раз очищать нагревательную пластину. Это уменьшает вероятность переноса микробов и бактерий с одного участка кожи на другой. Для дезинфекции нагревательной пластины используйте имеющуюся в продаже спиртовую дезинфицирующую салфетку.

- Не ремонтируйте и не настраивайте устройство самостоятельно. В этом случае правильная работа устройства не гарантируется.
- Не открывайте устройство. Несоблюдение этого указания приведет к аннулированию гарантии.
- Ремонт должен производиться только в авторизованном сервисном центре. Прежде чем предъявлять претензии, сначала проверьте батареи и при необходимости замените их.



По соображениям охраны окружающей среды не выбрасывайте устройство в бытовые отходы по окончании срока его службы. Утилизируйте устройство в подходящем местном пункте сбора или переработки отходов. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в местные организации, ответственные за утилизацию отходов.

### УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

- Батарейки нельзя выбрасывать в бытовые отходы. Они могут содержать ядовитые тяжелые металлы и подлежат специальной обработке.
- Приведенные ниже коды нанесены на батарейках, содержащих вредные вещества: Pb= Батарея содержит свинец, Cd= Батарея содержит кадмий, Hg= Батарея содержит ртуть.



## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ?

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Неправильная установка батареи.	Установите батарею заново.
	Батареи разряжены.	Замените обе батареи, как описано в данной инструкции по эксплуатации.
Прибор недостаточно сильно нагревается	Уровень заряда аккумулятора слишком низкий.	Замените обе батареи, как описано в данной инструкции по эксплуатации.
Прибор выдает 3 звуковых сигнала/светодиодный индикатор состояния устройства (1) мигает - даже после выключения и повторного включения устройства.	Уровень заряда аккумулятора слишком низкий, что означает, что устройство больше не сможет работать.	Замените обе батареи, как описано в данной инструкции по эксплуатации.
Прибор не выполняет свою функцию, хотя светодиодный индикатор состояния устройства (1) горит зеленым.	Устройство необходимо перезагрузить.	Снова нажмите кнопку питания.
Прибор выдает 5 звуковых сигналов/светодиодный индикатор состояния устройства (1) мигает - даже после выключения и повторного включения устройства.	Устройство может быть неисправно.	Обратитесь в отдел обслуживания клиентов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИБОР ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ BYE BITE
МОДЕЛЬ	2110
РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	109.5мм×34мм×24.8мм
ВЕС (без батареек)	28 грамм
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	2 x батарейки, тип AAA (LR03 1.5V)
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	50 °C ±2 °C
ДОПОЛНЕНИЯ	Чувствительная кожа: 3с, 47 °C ±2 °C Обычная кожа: 6 с, 50 °C ±2 °C
ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Около 300 применений (с каждой зарядкой)
ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	От -10 °C до 50 °C, относительная влажность от 30% до 85%, давление от 700hPa до 1060hPa
ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА	10 °C - 40 °C, относительная влажность 30% - 85%, давление 700hPa -1060hPa

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

---

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.

2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.

3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- механические повреждения корпуса;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность, температура);
- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны, насадки);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	<b>Гарантия 1 год</b>	
	____/____/____	
	<b>Дата продажи</b>	
	_____ <b>Серийный номер</b>	_____ <b>Печать магазина</b>

### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA**

Москва ООО «Кид Трейд» Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2 Тел.:

+7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroun.ru Режим работы:

пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

#### **Производитель:**

«Anteprima Brands International Ltd» 1 Ferris building, St.Luke's Street, PTA1020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

#### **Поставщик/Импортёр:**

ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.

Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года.

**www.nuvita-baby.ru**

**EAC**







