

Условия гарантии NUVITA

- Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.
- Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.
- Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.
- Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
 - механические повреждения корпуса;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность);

- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Условия Гарантии регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» и гарантийной политикой продавца/сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	Гарантия 1 год	
	____/____/____ Дата продажи	
	_____ Серийный номер	_____ Печать магазина

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд»
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroupp.ru
Режим работы:
пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd»

1 Ferris building, St.Luke's Street, PT1020 Guardamangia, Мальта, GLN 5358010000219

Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер: ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2.
Тел.: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 3 года.

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

www.nuvita-baby.ru

EAC

+nuvitaMED®

PRIMIPESI MUM & BABY



1330

**Умные электронные
весы для измерения
веса ребенка и мамы**

Инструкция по эксплуатации

Умные весы от Nuvita, предназначенные для отслеживания веса матери до и после родов, а также для детей с рождения.

Интеллектуальные весы используют передовые алгоритмы искусственного интеллекта: они записывают и анализируют такие данные, как вес и рост, предоставляя информацию о состоянии здоровья как ребенка, так и мамы.

Подходят для всей семьи: каждый пользователь может взвешиваться (до 150 кг) и имеет доступ к своей собственной истории данных и может отслеживать свой прогресс.

Минимальный уровень погрешности измерений. Это особенно важно для взвешивания новорожденных до и после кормления при контролируемом вскармливании.

Функция «тара» позволяет вычислить и не учитывать вес полотенца или подгузника, а функция «фиксация веса» гарантирует точные измерения, даже если ребенок не лежит спокойно во время измерения веса.

Компактный съемный поддон позволяет всего за несколько минут превратить детские весы в весы для взрослых, с легкостью транспортировать их куда угодно и компактно хранить.

Характеристики

- Встроенные высокоточные датчики.
- Светодиодный белый цифровой дисплей, упрощающий использование в темноте.
- Сенсорные кнопки, автоматическое отключение.
- Индикация низкого заряда батареи и перегрузки.
- Функции фиксации веса (HOLD) и тара (TARE)
- Дно оснащено нескользящими резиновыми ножками, которые фиксируют весы и предотвращают скольжение.
- Оснащены метрической линейкой (длиной до 69 см), которая удобна для измерения роста ребенка.
- Максимальный вес 150 кг.
- 4 единицы измерения: унция, грамм, кг, фунт.

Технические характеристики

Размер: 700 x 340 x 58 мм

Питание: 3x AAA Батарейки 1.5В (в комплект не входят)

Погрешность 5 г: для веса до 30 кг

Погрешность 100 г: для веса более 30 кг

Типы измерений: унция, грамм, кг, фунт

Вес весов: 1,80 кг

Установка

- Извлеките весы и аксессуары из упаковки.
- Вставьте 3 батарейки типа AAA 1,5 В (не входят в комплект) в отсек на задней панели весов, соблюдая указанную полярность.
- Разместите весы на ровную и устойчивую поверхность.
- Загрузите приложение "NUVITABABY" на свой смартфон из App Store или Google Play.
- Активируйте Bluetooth на своем смартфоне.
- Нажмите кнопку "ON/OFF" для активации весов. Это сенсорная кнопка, поэтому нажимайте на нее мягко.
- На дисплее весов еще раз проверьте, какая единица измерения выбрана (фунт, кг, унция или грамм), и, нажав сенсорную кнопку "UNIT", выберите нужную единицу измерения.
- Откройте приложение и следуйте инструкциям по настройке, чтобы синхронизировать весы в первый раз.
- После первой синхронизации в любое время, когда вы используете весы, сначала откройте приложение, затем нажмите "ON/OFF" на весах, и они автоматически синхронизируются с вашим телефоном и приложением.

10. Чтобы воспользоваться приложением, следуйте инструкциям, которые вы найдете на странице, перейдя по QR-коду.



Описание дисплея

В весах используются сенсорные кнопки с новейшими технологиями. Нажимайте на них аккуратно, так как они очень чувствительные.

“ON/OFF” кнопка: короткое нажатие для включения и длительное для выключения

“TARE” кнопка: легкое нажатие для обнуления и функции «ТАРА»

“UNIT” кнопка: легкое нажатие для выбора единиц измерения

“HOLD” кнопка: легкое нажатие для фиксации данных




Функция автоматического отключения


Весы автоматически отключатся для экономии электроэнергии, если не выполняется никаких операций, данные останутся неизменными в течение примерно 30 секунд.

Установка лотка для взвешивания ребенка


ШАГ 1 Вставьте две части лотка друг в друга.

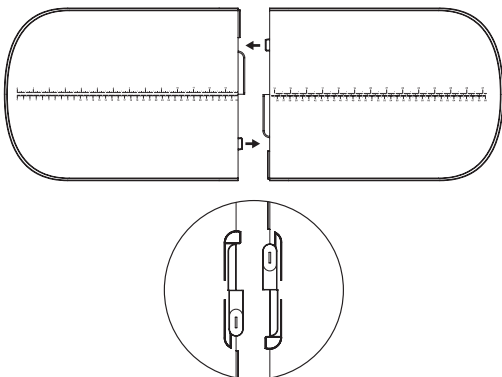

ШАГ 2 Вставьте лоток в середину основания.

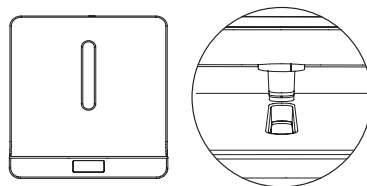


ШАГ 3 Зафиксируйте лоток вращающимися язычками.

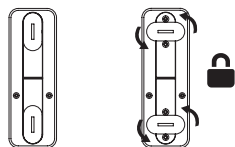

Установка батареек

ВАЖНО:

- Когда яркость ЖК-дисплея снижается, это означает, что батарейки разряжены. Пришло время их заменить.
- Если весы не будут использоваться в течение длительного времени, рекомендуется вынуть батарейки.
- Поместите использованные батарейки в специальное мусорное ведро для правильной утилизации.

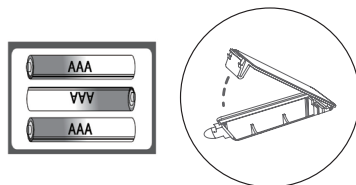

Перегруз и низкий заряд батареи

1. Когда на светодиодном дисплее отображается сообщение "ERR", это означает, что максимальная грузоподъемность объекта превышает 150 кг. Пожалуйста, прекратите взвешивание или уменьшите вес, чтобы избежать повреждения датчика.
2. Когда на светодиодном дисплее отображается "LO", это означает, что заряд батареи разряжен. Пожалуйста, замените 3 новые батарейки типа AAA.



Как использовать весы для взрослых

1. Включите весы, нажав сенсорную кнопку "ON/OFF". Когда на дисплее появится "0000", весы будут готовы к использованию. Если выбранная единица измерения не та, которую вы хотите, коротко нажмите "UNIT", чтобы выполнить выбор.
2. Осторожно встаньте на весы. Дождитесь стабилизации веса.
3. Вес будет отображен на дисплее и автоматически отправлен в приложение по Bluetooth.



ВАЖНО: Если вам нужно еще раз взвесить в это время, заберите ребенка и коротко нажмите "TARE", чтобы обнулить вес и взвесить еще раз.

Как использовать весы для детей

1. Включите весы, нажав сенсорную кнопку "ON/OFF". Когда на дисплее появится "0000", весы будут готовы к использованию. Если выбранная единица измерения не та, которую вы хотите, коротко нажмите "UNIT", чтобы выполнить выбор.
2. Аккуратно положите новорожденного в лоток весов. Дождитесь стабилизации веса. Если ваш ребенок двигается, вы также можете нажать "HOLD", чтобы зафиксировать вес ручную.
3. Если при взвешивании ребенка вы используете полотенце или любой другой "дополнительный груз", обязательно положите его первым (без ребенка), затем нажимайте сенсорную кнопку TARE, пока не появятся нули.



4. Следуйте инструкциям приложения, чтобы измерения веса попали в приложение.
5. Чтобы выключить весы, аккуратно нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунд. Весы автоматически выключаются после 30 секунд бездействия.

Приложение NUVITABABY

Приложение дает вам возможность:

- Просматривать и вести мониторинг веса с течением времени
- Устанавливать напоминания о проведении измерений
- Делиться информацией с врачом
- Отслеживать рост ребенка
- Получать доступ к советам по грудному вскармливанию и т.д.

Для большей информации о приложении посетите сайт www.nuvita-baby.ru.

Уход

Протирайте весы мягкой, слегка влажной тканью, не используйте агрессивные моющие средства.

За помощью обращайтесь в службу поддержки клиентов указанную на веб-сайте www.nuvita-baby.ru