


Массажёр для СТИМУЛЯЦИИ ЛАКТАЦИИ

Руководство пользователя

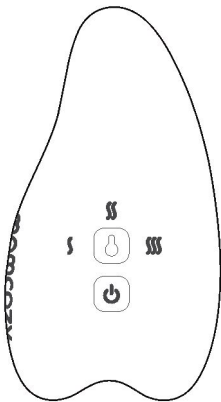

momcozy

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ использование данного изделия лицами, не знакомыми с его функциями.
- Храните вне досягаемости детей.
- Это не игрушка.
- Не повреждайте шнур или вилку и не используйте изделие, если шнур или вилка повреждены либо если штекер неплотно входит в розетку. Несоблюдение этих мер может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не используйте прибор ни для каких целей, кроме указанных в данном руководстве или на упаковке.
- Не перегружайте источник питания.
- Не используйте прибор, если он повреждён.
- Используйте только USB-кабель, входящий в комплект.
- Всегда вставляйте вилку плотно и надёжно.
- Перед зарядкой убедитесь, что массажёр полностью сухой.
- Держите вдали от воды во время зарядки.
- Регулярно очищайте штекер, чтобы на нём не скапливались пыль или загрязнения.
- Перед чисткой отсоединяйте шнур от источника питания.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками.

- Не погружайте прибор полностью в воду.
- Если вы используете любые активные имплантируемые медицинские устройства, чувствительные к магнитным полям (например, кардиостимулятор или имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор), рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием лактационного массажёра Momsozy.
- Не кипятите, не запекайте и не нагревайте массажёр в микроволновой печи.
- Не передавайте данный персональный прибор другим лицам из соображений гигиены.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями только при условии, что они находятся под надлежащим присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации устройства и осознают связанные с этим риски.
- Дети не должны играть с данным прибором.
- Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без надзора.
- Утилизация батареи путём выбрасывания в огонь, помещение в нагретую духовку, а также механическое раздавливание или разрезание батареи может привести к взрыву.
- Оставление батареи в условиях чрезвычайно высокой температуры может привести к взрыву либо утечке

воспламеняющейся жидкости или газа.

- Воздействие чрезвычайно низкого атмосферного давления может вызвать взрыв батареи или утечку воспламеняющейся жидкости либо газа.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление о соответствии требованиям ЕС:

Компания Hong Kong Lute Technology Co., Limited

настоящим заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/30/ЕС.

УТИЛИЗАЦИЯ



По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами.

Передайте устройство в специализированный пункт сбора для переработки электронного оборудования и аккумуляторов.

Отработанное электрическое и электронное оборудование может оказывать потенциально вредное воздействие на окружающую среду. Неправильная утилизация может привести к накоплению токсичных веществ в воздухе, воде и почве, что оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Вы обязаны обеспечивать правильную утилизацию устройства.

Для получения дополнительной информации обратитесь в местные коммунальные службы.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Грудное вскармливание может стать серьёзным испытанием для кормящих мам, поэтому мы создали лактационный массажёр Motsozy, чтобы обеспечить максимально комфортный опыт. Массажёр помогает уменьшить боль и дискомфорт, связанные с кормлением, закупоркой протоков, переполнением груди и маститом. Кроме того, он ускоряет приток молока и способствует более полному опорожнению груди.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- **Несколько режимов и уровней интенсивности:**

Массажёр Motsozy оснащён несколькими вибрационными режимами и настройками интенсивности, что помогает мамам эффективно справляться с болезненными закупоренными протоками. Кроме того, массажёр значительно уменьшает дискомфорт при переполнении груди.

- **Регулируемые уровни нагрева:**

Помогают при закупорке протоков и мастите, способствуют притоку молока во время кормления.

- **МАГНИТНАЯ USB-ЗАРЯДКА:**

Магнитный разъём обеспечивает более быстрый и удобный процесс зарядки.

В комплект входит удобный мешочек, позволяющий брать массажёр с собой в любые поездки и пользоваться им в нужный момент.

- **Разработан для максимального комфорта:**

Наш массажёр создан с приоритетом на удобство, поэтому лактационные консультанты рекомендуют его для облегчения типичных проблем при грудном вскармливании.

- **Водонепроницаемость IPX7:**

Благодаря влагозащитной конструкции массажёр можно использовать в душе, что даёт мамам свободу применять его тогда, когда это особенно удобно.

- **Обеспечивает свободный поток молока:**


Массажёр Motsozy эффективно подготавливает грудь к кормлению и стимулирует её, способствуя более полноценной выработке и выделению молока.

- **Ускоряет приток молока:**


Мягкое воздействие массажёра помогает формировать более выраженный рефлекс прилива, стимулируя нервные окончания в груди и соске.

- **Точечный массаж:**

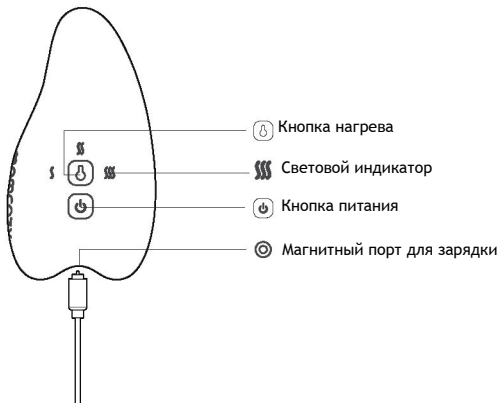

Несколько контактных зон обеспечивают направленное и более эффективное воздействие.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




 Не используйте прибор во время зарядки

Кнопка питания:

1. Включите массажёр, нажав и удерживая кнопку питания " " в течение 2 секунд.
2. Кратким нажатием кнопки питания " " можно переключать режимы и интенсивность вибрации..

3. Выключите массажёр, нажав и удерживая кнопку питания "  " в течение 2 секунд.

Кнопка нагрева

1. Включите функцию нагрева "  " нажав и удерживая кнопку нагрева в течение 2 секунд. Режим нагрева автоматически выключится по завершении 30-минутного цикла.
2. Кратким нажатием кнопки нагрева "  " переключайте 3 уровня температуры.
3. Выключите функцию нагрева "  " нажав и удерживая кнопку нагрева в течение 2 секунд.

Магнитная зарядка:

1. Удобное одноручное подключение, надёжная магнитная фиксация.
2. Подключите USB-кабель к компьютеру или USB-адаптеру.
3. Во время зарядки индикатор будет медленно мигать белым светом.
4. Когда массажёр полностью заряжен, индикатор будет светиться постоянным белым светом.
5. Полная зарядка устройства занимает примерно 3 часа. Заряжайте массажёр по необходимости.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Используйте подогревающую поверхность и выполняйте плавные движения по груди в направлении к соску.



Используйте подогревающую поверхность и массируйте грудь, продвигаясь к соску.



Аккуратно массируйте грудь узкой частью массажёра.



Используйте узкий наконечник массажёра и оказывайте лёгкое давление на участки с закупоренными протоками.




Аккуратно массируйте грудь изогнутым краем массажёра.



Размещайте массажёр на разных участках груди, чтобы стимулировать прилив молока и улучшить его отток.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

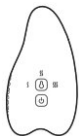

Лактационный
массажёр



USB-кабель с
магнитным
разъёмом для
зарядки



Портативный
чехол для
хранения

Технические характеристики

Модель: A1

Время работы: 1,5 часа (фактическое время зависит от выбранной температуры и режима вибрации)

Габариты: 115 мм × 61,5 мм × 27,5 мм

Количество режимов вибрации: 6

Ёмкость аккумулятора: 800 мА·ч

Тип аккумулятора: перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор

Входное питание: DC 5V = 1A

Время зарядки: приблизительно 3 часа

Водонепроницаемость: IPX7

Температурные режимы:

- Низкая температура: 39 °C / 102,2 °F
- Средняя температура: 42 °C / 107,6 °F
- Высокая температура: 45 °C / 113 °F

Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация допускается при соблюдении двух условий:

- (1) устройство не должно вызывать вредных помех;
- (2) устройство должно принимать любые поступающие помехи, включая такие, которые могут привести к нежелательной работе оборудования.

Примечание:

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса В согласно Части 15 Правил FCC. Эти требования направлены на обеспечение разумной защиты от вредных помех в бытовых условиях.

Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при неправильной установке или эксплуатации, может вызвать вредные помехи радиосвязи. Однако отсутствие возникновения помех в конкретной установке не гарантируется.

Если это оборудование вызывает вредные помехи при приёме радио- или телевизионного сигнала (что можно определить путём включения и выключения устройства), пользователю рекомендуется предпринять следующие меры:

- Переориентировать или переставить приёмную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключить устройство к розетке, относящейся к другой электрической цепи, нежели та, к которой подключён приёмник.
- Обратиться за помощью к продавцу оборудования или к опытному специалисту по радио- или телевизионной технике.

UK

REP

Prolinx Global LTD

27 Олд Глостер-стрит, Лондон, WC1N 3AX, Великобритания

**Производитель:** Hong Kong Lute Technology Co., Limited**Адрес:** Комната 02, 21-й этаж, коммерческое здание Hip Kwan,
Питт-стрит 38, район Яу Ма Тей, Коулун, Гонконг

Email: support@momcozy.com

EC

REP

Prolinx GmbH

Бремштрассе 56, 40239 Дюссельдорф, Германия

**Производитель:** Hong Kong Lute Technology Co., Limited**Адрес:** Комната 02, 21-й этаж, коммерческое здание Hip Kwan,
Питт-стрит 38, район Яу Ма Тей, Коулун, Гонконг

Email: support@momcozy.com

Импортер в США

Компания: Pacific Fortune Management Inc.

Адрес: 145 Ист Дуарте-роуд, офис AA198, г. Аркадия, Калифорния, 91006,
США

СДЕЛАНО В КИТАЕ



MEHRWEG



momcozy

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции Momcozy.

Вся актуальная информация о гарантийном обслуживании, условиях гарантии, сроках ремонта и адресах сервисных центров размещена на нашем официальном сайте: momcozycenter.ru

Для оперативного решения вопросов, пожалуйста, посетите указанный сайт или обратитесь к продавцу.

Контакты Сервисного центра:

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, дом 62

Электронная почта: service@stokke-repair.ru

Контактный телефон: 8 (929) 630-47-09

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 10:00 до 19:00

